

Scoring van de CELF-5-NL op Q-global

Aanmelden

Om een test te kunnen afnemen of scoren op het online platform, dient u zich eerst aan te melden als gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie onze website.


Q-global account activeren

Nadat u uw inloggegevens heeft ontvangen, klikt u op de activatielink in de mail om uw account te activeren. Let op: de link verloopt na 30 dagen.

- De eerste keer dat u zich inlogt moet u de algemene voorwaarden en de privacy policy accepteren.
- U kunt hierna zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.
- Daarna kunt u met uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op <https://qglobal.pearsonclinical.com/qg/login.seam>. Wij raden u aan om deze link toe te voegen aan uw favorieten.

Uitlegscherm

De eerste keer dat u inlogt ziet u het volgende scherm (afbeelding 1):

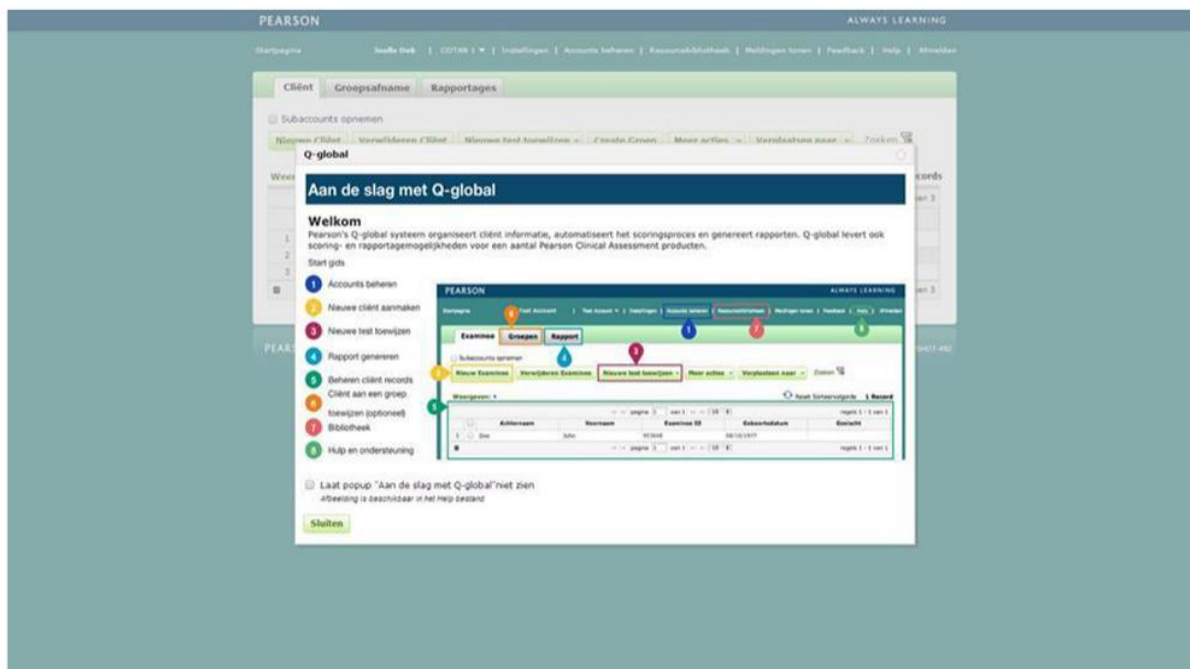


Afbeelding 1 *Aan de slag met Q-global*

Hierin wordt kort uitgelegd hoe het platform werkt en welke tabbladen er zijn.

Startpagina

Daarna komt u op de startpagina van Q-global terecht (afbeelding 2).

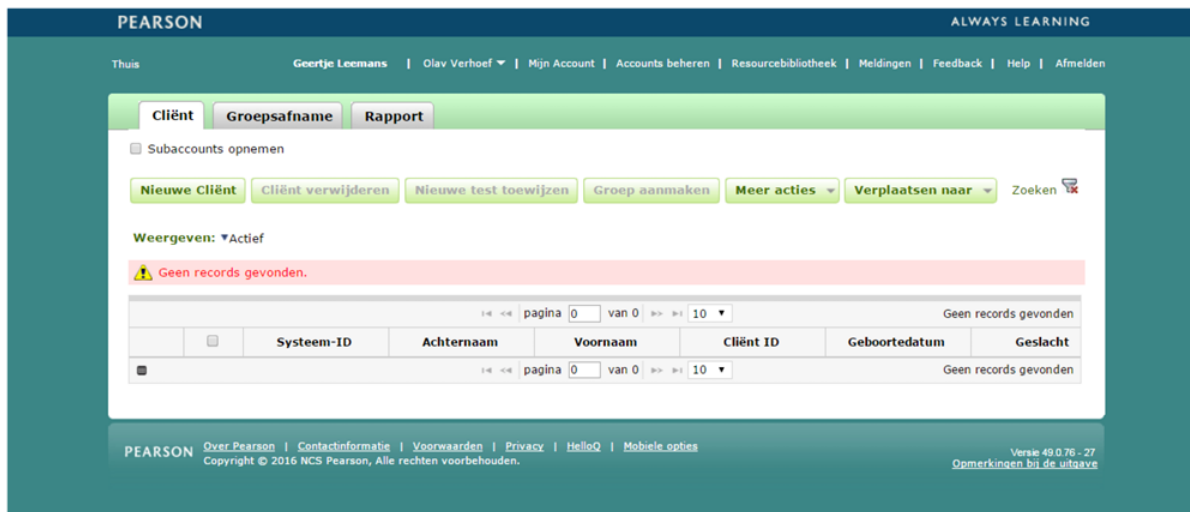


Afbeelding 2 Startpagina

Aanmaken nieuwe cliënt


Vanuit de startpagina kunt u een nieuwe cliënt toevoegen. U kiest 'Nieuwe cliënt' links bovenaan. Daarna vult u de persoonsgegevens van de cliënt in (afbeelding 3). De enige verplichte velden zijn:

- Voornaam/achternaam van de cliënt of de Client ID, ter referentie van de cliënt;
- Geboortedatum, voor de keuze van de juiste normgroep

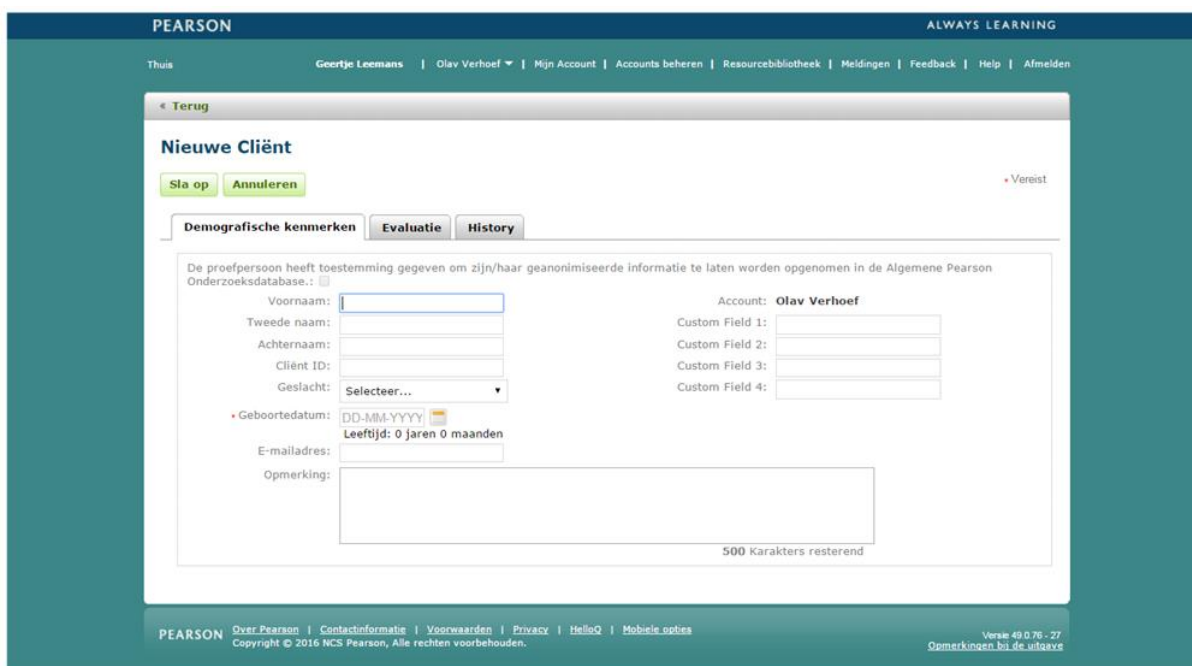

Afbeelding 3 Nieuwe cliënt


Nadat u de ingevulde gegevens heeft opgeslagen, is de nieuwe cliënt zichtbaar op het startscherm (afbeelding 4).

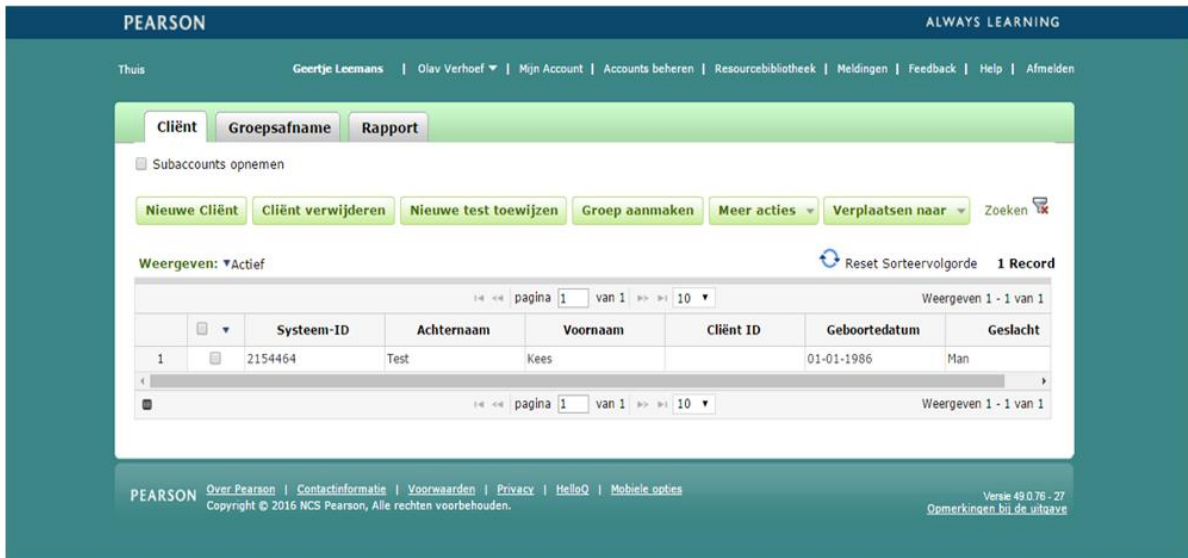

Afbeelding 4 Nieuwe cliënt aangemaakt

Gegevens nieuwe cliënt aanpassen


Als u op een later moment nog persoonsgegevens wilt aanpassen, klikt u op de startpagina op de naam van de cliënt. De pagina met de gegevens van de cliënt wordt geopend. Om de gegevens te bewerken klikt u op 'Bewerk' links boven in beeld (afbeelding 5).

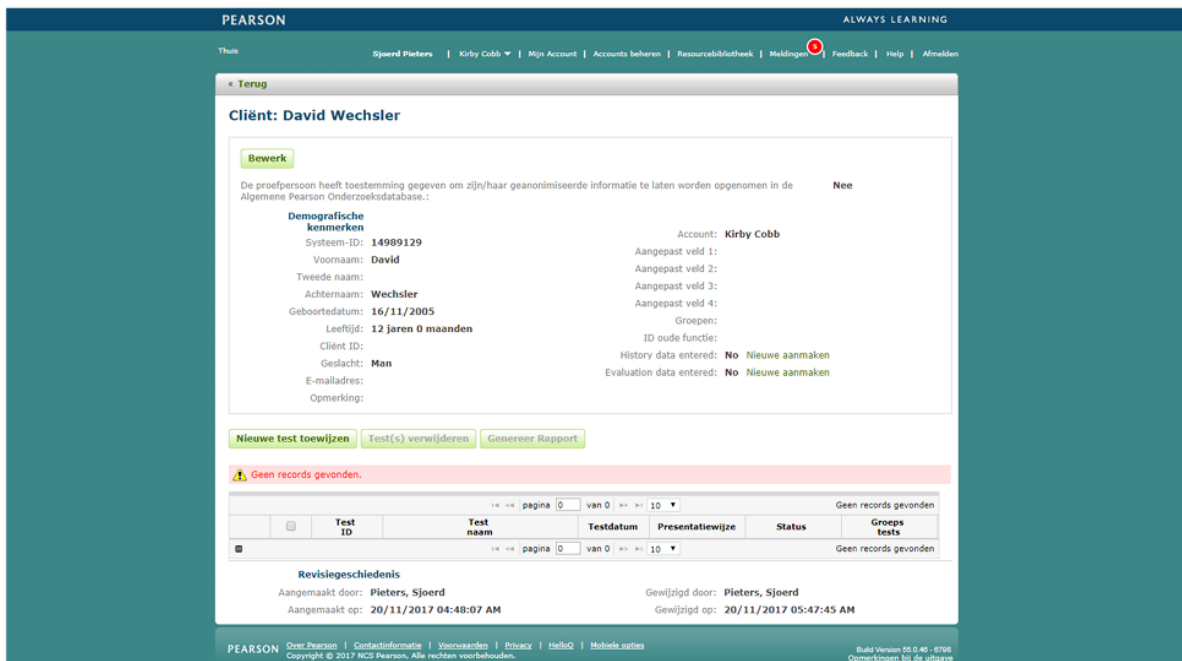

Afbeelding 5 Gegevens bewerken op de 'Cliënt'- pagina

Test toewijzen

Op de startpagina vinkt u links vóór de client het hokje aan en kiest u 'Nieuwe test toewijzen'. U klikt op de testnaam CELF-5-NL. Als u op de ster naast de testnaam klikt, maakt u deze test favoriet en komt deze bovenaan uw lijst met tests te staan (afbeelding 6). Daarna klikt u op 'Toewijzen'. U kunt ook een nieuwe test toewijzen vanaf de 'Cliënt'-pagina.

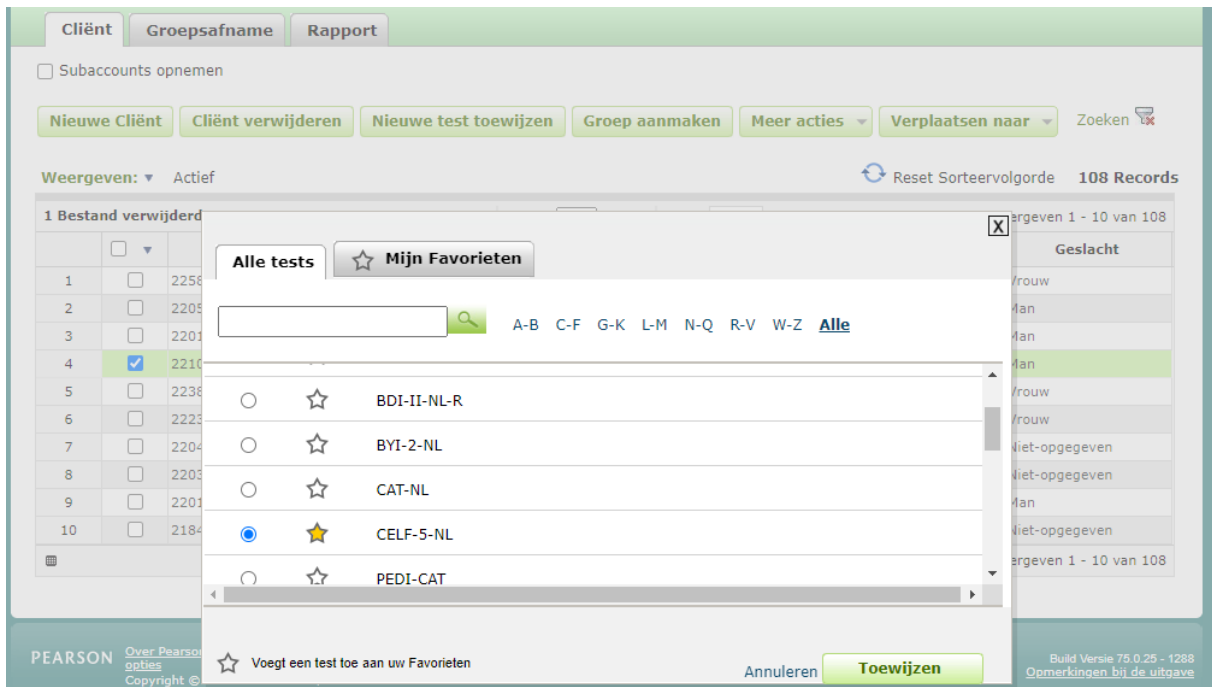

Afbeelding 6 Test toewijzen

Testdetails

Hierna komt u op de pagina 'Testdetails'. Bij 'Clientdetails' kunt u eventueel nog de cliëntgegevens aanpassen. Verplicht om in te vullen zijn 'Testdatum' en 'Testleiders'. In het tabblad Persoonsgegevens kunt u de gegevens zoals school en handvoorkeur opgeven. Hier dient u ook de keuze te maken tussen de Nederlandse of Vlaamse normen. Dit is een verplicht veld, omdat op basis hiervan de normgroep wordt bepaald (afbeelding 7).

Afbeelding 7 *Tabblad Persoonsgegevens*

In het tabblad Aanvullende Informatie kunt u gedragsobservaties kwijt, zoals testattitude, aandacht, en responsnelheid. Dit tabblad is niet verplicht om in te vullen (afbeelding 8).

Afbeelding 8 *Tabblad Aanvullende Informatie*

Vervolgens neemt u in het tabblad 'Ruwe Scores' de scores per subtest van het antwoordformulier over. U kunt er ook voor kiezen om de scores op itemniveau in te vullen door op het plusje vóór de subtest of op 'Openen Itemscores' te klikken. In het CELF-5-NL rapport wordt dan voor deze subtests een uitgebreide itemanalyse toegevoegd. Voor meer informatie over welke score u dient in te voeren, kunt u kiezen voor 'Hulp bij de test' (afbeelding 9).

Sla op Opslaan en sluiten Annuleren

Hulp bij de test

Persoonsgegevens Aanvullende informatie **Ruwe scores**

Antwoordformulier | Observatieschaal

Overzicht subtests

<input checked="" type="checkbox"/> Zinnen Begrijpen	Ruwe score <input type="text" value="10"/> (0 tot 25)	Openen Itemscores
<input checked="" type="checkbox"/> Linguïstische Concepten	Ruwe score <input type="text" value="10"/> (0 tot 25)	Openen Itemscores
<input checked="" type="checkbox"/> Woordstructuur	Ruwe score <input type="text" value="10"/> (0 tot 31)	Openen Itemscores
<input checked="" type="checkbox"/> Woordcategorieën	Ruwe score <input type="text" value="10"/> (0 tot 41)	Openen Itemscores
<input checked="" type="checkbox"/> Aanwijzingen Volgen	Ruwe score <input type="text"/> (0 tot 33)	Openen Itemscores

Itemscores

Opgave

1. Wijs de witte driehoek aan. Start.	(0 tot 1)	<input type="text"/>
2. Wijs de zwarte cirkels aan. Start.	(0 tot 1)	<input type="text"/>
3. Wijs maar aan: de grote cirkel en de kleine cirkel. Start.	(0 tot 1)	<input type="text"/>
4. Wijs de grote X aan en dan de kleine driehoek. Start.	(0 tot 1)	<input type="text"/>

Afbeelding 9 Het invullen van de ruwe scores en hulp bij de test

In het tabblad 'Ruwe Scores' kunt u ook de resultaten van de Observatieschaal toevoegen. Klik hiervoor op 'Observatieschaal' en dan op 'Voeg beoordelaar toe' om een beoordelaar toe te voegen. In het veld 'Beoordelaar' kunt u het soort beoordelaar selecteren (docent, ouder of kind). Vervolgens selecteert u de thuistaal. Klik daarna op het plusje voor 'Beoordelaar' om resultaten in te voeren (afbeelding 10). Herhaal deze stappen om meerdere beoordelaars toe te voegen.

Sla op Opslaan en sluiten Annuleren

Hulp bij de test

Persoonsgegevens Aanvullende informatie **Observatieschaal**

Antwoordformulier

Voeg beoordelaar toe Samenvatting door de onderzoeker

Beoordelaar: **Docent** Thuistaal: **Nederlands** Verwijder

Aanwijzingen voor het invullen

De volgende beweringen geven communicatieproblemen aan die sommige kinderen hebben.

Luisteren	Nooit of bijna nooit	Soms	Vaak	Altijd of bijna altijd
1. heeft moeite met opletten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. heeft moeite met opvolgen van mondelinge aanwijzingen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. heeft moeite met onthouden wat mensen zeggen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. heeft moeite met het begrijpen van wat mensen zeggen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. moet mensen vragen te herhalen wat ze hebben gezegd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Afbeelding 10 Resultaten Observatieschaal toevoegen

Sla de resultaten op door middel van de knop 'Opslaan en sluiten'.

Rapport genereren

U kunt nu kiezen voor de optie 'Genereer Rapport' (afbeelding 11).

« Terug

Testdetails: David Wechsler

[Bewerk](#) [Genereer Rapport](#) • Vereist

Het testrecord is succesvol opgeslagen.

Cliënt Details

Voornaam:
Tweede naam:
Achternaam:
Cliënt ID:
Geslacht:
• Geboortedatum:
Leeftijd: 5 jaar 8 maanden
E-mailadres:

Testdetails

Afname: **CELF-5-NL**
Batch ID:
Status: **Gereed voor rapporteren**
• Afname datum:
Leeftijd tijdens testafname: 5 jaar 8 maanden
Testleider:

Afbeelding 11 *Rapport genereren*

Vervolgens wordt een scherm geopend waarin u kunt aangeven welke analyses en gegevens u in het rapport wilt terugzien (afbeelding 12).

« Terug

Testdet Rapport Configuratie

[Bewerk](#) [Genereer Rapport](#) [Annuleren](#)

Cliënt: **Wechsler, David** Bestandstype:
Cliënt ID: Geselecteerde records: **1**
Afname: **CELF-5-NL** Voorraad nodig: **1 rapport toepassing(en)**.
Status: **Gereed voor rapporteren** Beschikbare voorraad: **Ongelimiteerde rapport toepassingen.**
Abonnement verloopt 17-03-2025 [Nu kopen](#)

Rapport:

[Hulp bij de test](#)

Rapportopties	Instellingen
<input checked="" type="checkbox"/> Gebruik de naam van de cliënt	Betrouwbaarheidsinterval <input type="radio"/> 90% <input checked="" type="radio"/> 95%
<input checked="" type="checkbox"/> Score-overzicht	Kritieke waarde <input type="radio"/> Leeftijdsgroep <input checked="" type="radio"/> Totale groep
<input checked="" type="checkbox"/> Afname buiten leeftjidsbereik	Significantieniveau <input checked="" type="radio"/> .05 <input type="radio"/> .15
<input checked="" type="checkbox"/> Vergelijking indexscores	
<input checked="" type="checkbox"/> Grafieken standaardscores	
<input checked="" type="checkbox"/> Grafieken percentielscores	
<input checked="" type="checkbox"/> Beschrijvende rapportage	
<input checked="" type="checkbox"/> Analyse van de opgaven	
<input checked="" type="checkbox"/> Samenvatting Checklist Pragmatiek in Activiteiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Samenvatting Observatieschaal	


[bij de test](#)

Persoonsgegevens | Aanvullende informatie | Ruwe scores

Afbeelding 12 *Rapport Configuratie*

Rapport openen

Wanneer u 'Genereer rapport' heeft gekozen, verschijnt onder in uw taakbalk een pdf-download van het rapport (afbeelding 13). Als u hierop klikt, zal het rapport geopend worden.

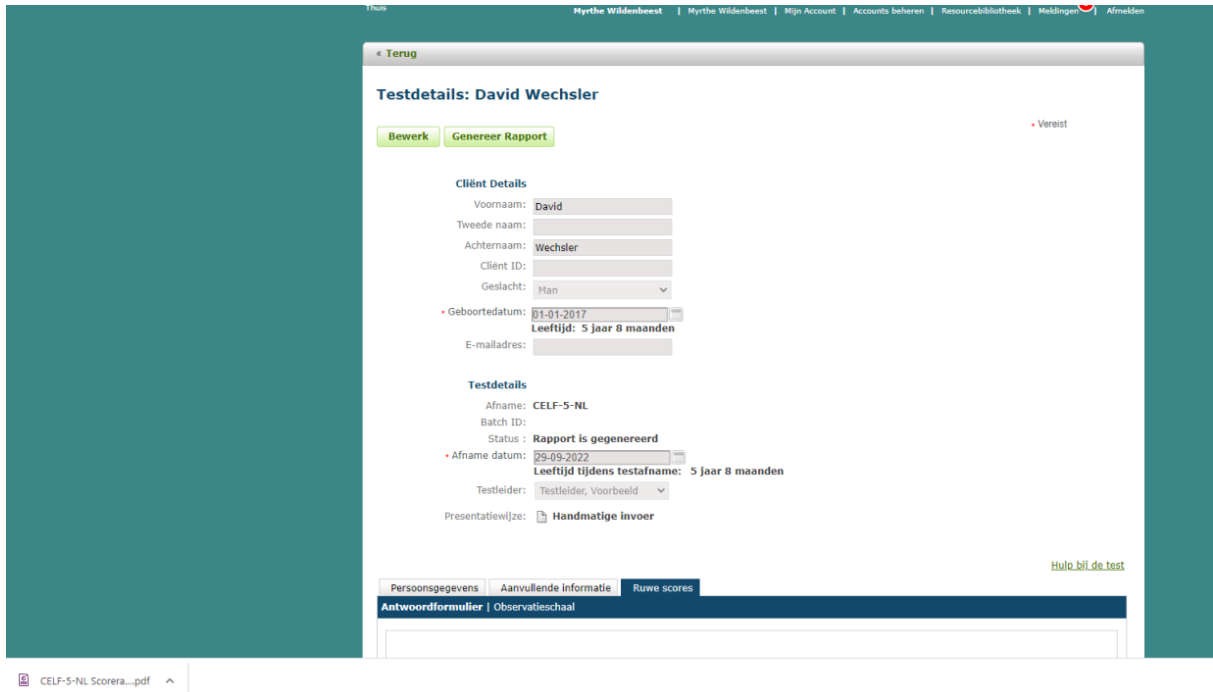

Afbeelding 13 *Download van testrapport in taakbalk*